PAGGSM,
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»,
ООО «Завод Медсинтез», Россия
Макет инструкции по медицинскому
применению препарата

Код макета: ИМП-PAGGSM-01

ГЕМОДЖЕНИКС

Инструкция по применению (для потребителя)

Растворы стерильные для глицеролизации, деглицеролизации, отмывки и консервации эритроцитов в однокамерных полимерных контейнерах
по ТУ 32.50.13-002-02649147-2019
PAGGSM

Описание медицинского изделия
Однокамерный полимерный контейнер с раствором PAGGSM. Контейнер может иметь луер с наружной резьбой или порт для полимерной иглы, с помощью которых контейнер можно присоединить к системе для аппаратного афереза.

Состав PAGGSM:
глюкоза моногидрат 9,405 г, аденин 0,194 г, хлорид натрия 4,21 г, маннитол 10,0 г, гуанозин 0,408 г, натрия дигидрофосфат дигидрат 1,255 г, натрия гидрофосфат дигидрат 1,432 г, вода для инъекций до 1000 мл*

pH 5,7 – 6,3

* Для доведения pH могут быть использованы растворы соляной кислоты или гидроксида натрия.

Назначение
Раствор PAGGSM предназначен для использования в качестве добавочного раствора при отмывке и консервации эритроцитсодержащих компонентов.

Побочные эффекты
Не известны побочные эффекты, связанные с использованием раствора PAGGSM.

Обратите внимание
- Проверьте целостность изделия и его упаковки перед использованием. Если изделие или его упаковка повреждены – не используйте.
- Проверьте срок годности раствора. Не используйте раствор после истечения срока годности.
- Проверьте название раствора и убедитесь, что выбранный раствор подходит для запланированной вами процедуры.
- Проверьте прозрачность раствора. Если раствор мутный, не используйте его.
- При вскрытии упаковки и использовании раствора избегайте контакта с острыми предметами.
- Постарайтесь использовать раствор сразу после извлечения из упаковки.

- После окончания процедуры утилизируйте упаковку и оставшийся раствор. Не используйте изделие повторно.
- Не стерилизуйте изделие повторно.

Применение

PAGGSM предназначен для применения в стационарных условиях в учреждениях Службы крови, медицинских учреждениях и в условиях выездных бригад.

PAGGSM может быть использован при отмывке и консервации эритроцитов автоматическим аппаратным методом.

Для проведения процедуры используют аппараты и совместимые с ними расходные материалы. Контейнер с раствором PAGGSM присоединяйте к расходному материалу через луер с наружной резьбой или порт для полимерной иглы.

Перед использованием аппаратов и расходных материалов ознакомьтесь с инструкциями по применению.

Условия хранения и эксплуатации


PAGGSM рекомендуется хранить при:

температуре воздуха от +1 до +35 °С;
относительной влажности воздуха 35-85%;
атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

PAGGSM рекомендуется использовать при:

температуре воздуха от +18 до +25 °С;
относительной влажности воздуха 35-85%;
атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

Символы

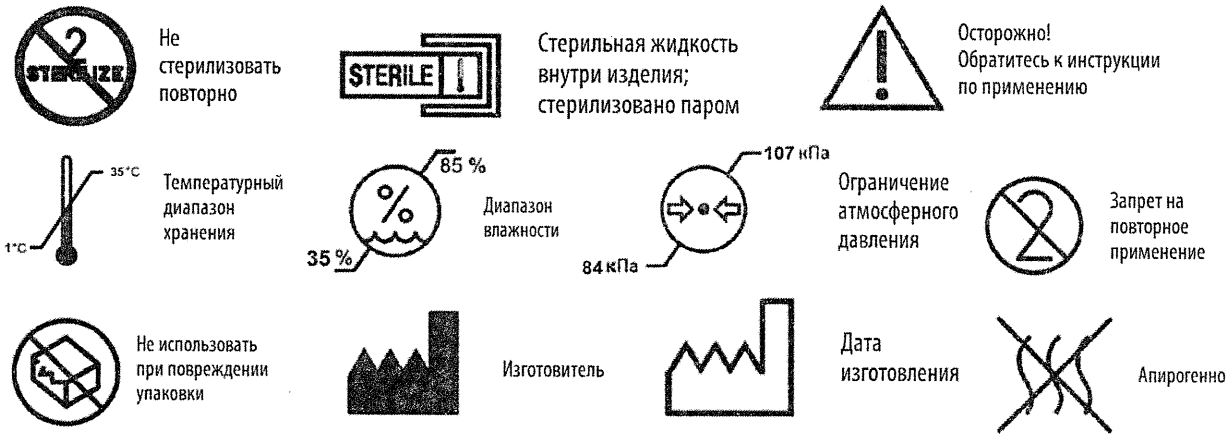

Утилизация

После использования изделие должно быть утилизировано как отходы класса Б «Эпидемиологически опасные отходы».

После истечения срока годности или при повреждении упаковки изделие должно быть утилизировано как отходы класса А «Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам».

По дополнительному запросу может быть представлена инструкция по применению (для специалиста).

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Адрес: 123154, Россия, г. Москва,
Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комната 4.
Тел./факс: +7 (495) 363 69 38
e-mail: Haemogenics@yandex.ru
Сайт: www.haemogenics.com

Примечание: Расположение текста в инструкции также может незначительно изменяться