Натрия хлорид 0,9% с глюкозой 0,2%,
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»,
ООО «Завод Медсинтез», Россия
Макет инструкции по медицинскому
применению препарата

Код макета: ИМП-NaCl+GLU-01

ГЕМОДЖЕНИКС

Инструкция по применению (для потребителя)

Растворы стерильные для глицеролизации, деглицеролизации, отмывки и консервации эритроцитов в однокамерных полимерных контейнерах
по ТУ 32.50.13-002-02649147-2019
Натрия хлорид 0,9% с глюкозой 0,2%

Описание медицинского изделия
Однокамерный полимерный контейнер с раствором Натрия хлорида 0,9% с глюкозой 0,2%. Контейнер имеет порт для полимерной иглы, с помощью которого контейнер можно присоединить к расходным материалам для отмывки эритроцитов.

Состав Натрия хлорида 0,9% с глюкозой 0,2%:
натрия хлорид 9 г, глюкоза моногидрат 2 г, натрия дигидрофосфат дигидрат 0,034 г, натрия гидрофосфат дигидрат 1,04 г, вода для инъекций до 1000 мл*

pH 5,8 – 7,2

* Для доведения pH могут быть использованы растворы соляной кислоты или гидроксида натрия.

Назначение
Раствор Натрия хлорида 0,9% с глюкозой 0,2% предназначен для отмывки эритроцитов от белков плазмы или после разморозки и деглицеролизации.

Побочные эффекты
Не известны побочные эффекты, связанные с использованием раствора Натрия хлорида 0,9% с глюкозой 0,2%.

Обратите внимание
- Проверьте целостность изделия и его упаковки перед использованием. Если изделие или его упаковка повреждены – не используйте.
- Проверьте срок годности раствора. Не используйте раствор после истечения срока годности.
- Проверьте название раствора и убедитесь, что выбранный раствор подходит для запланированной вами процедуры.
- Проверьте прозрачность раствора. Если раствор мутный, не используйте его.
- При вскрытии упаковки и использовании раствора избегайте контакта с острыми предметами.
- Постарайтесь использовать раствор сразу после извлечения из упаковки.

- После окончания процедуры утилизируйте упаковку и оставшийся раствор. Не используйте изделие повторно.
- Не стерилизуйте изделие повторно.

Применение

Натрия хлорид 0,9% с глюкозой 0,2% предназначен для применения в стационарных условиях в учреждениях Службы крови, медицинских учреждениях и в условиях выездных бригад.

Натрия хлорид 0,9% с глюкозой 0,2% может быть использован при отмывке эритроцитов автоматическим аппаратным методом.

Для проведения процедуры используют аппараты и совместимые с ними расходные материалы. Контейнер с раствором Натрия хлорида 0,9% с глюкозой 0,2% присоединяйте к расходному материалу через порт для полимерной иглы.

Перед использованием аппаратов и расходных материалов ознакомьтесь с инструкциями по применению.

Условия хранения и эксплуатации


Натрия хлорид 0,9% с глюкозой 0,2% рекомендуется хранить при:

температуре воздуха от +1 до +35 °С;
относительной влажности воздуха 35-85%;
атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

Натрия хлорид 0,9% с глюкозой 0,2% рекомендуется использовать при:

температуре воздуха от +18 до +25 °С;
относительной влажности воздуха 35-85%;
атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

Символы

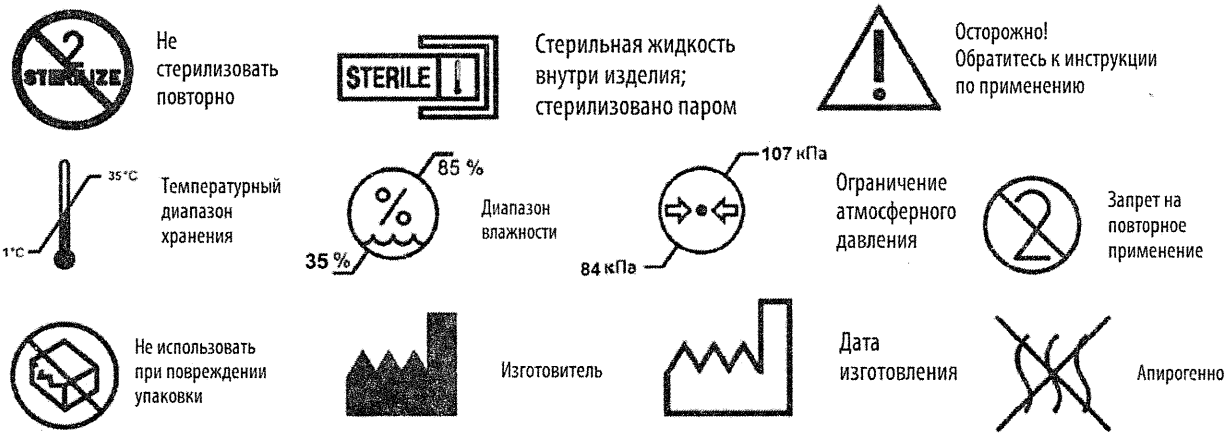

Утилизация

После использования изделие должно быть утилизировано как отходы класса Б «Эпидемиологически опасные отходы».

После истечения срока годности или при повреждении упаковки изделие должно быть утилизировано как отходы класса А «Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам».

По дополнительному запросу может быть представлена инструкция по применению (для специалиста).

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Адрес: 123154, Россия, г. Москва,
Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комната 4.
Тел./факс: +7 (495) 363 69 38
e-mail: Haemogenics@yandex.ru
Сайт: www.haemogenics.com

Примечание: Расположение текста в инструкции также может незначительно изменяться